

## ELECTROLISS HÅRBORTTAGNINGSTEKNIK MED HJÄLP AV ELEKTROLYS

Under nästan 30 år har BaByliss varit ledande i den tekniska utvecklingen av produkter som uppfyller kvinnors önskemål för hårborttagningssystem. Tack vare en hårborttagningsteknik med hjälp av elektrolys, kan du nu ta bort hårväxt permanent och smärtfritt med BaByliss ELECTROLISS.

Denna teknik riktar en knappt märkbar elektrisk ström mot follikelns bas. En kemisk reaktion neutraliserar hudpapillen som ger håret näring och detta bromsar återväxten avsevärt. Denna teknik tar alltså inte bara bort det synliga håret, det förstör roten för en allt mer långsiktig hårborttagning.

**Bakgrundsinformation om kroppshår**  
(se figur 1 - 2):

- Hår växer från en säck som kallas follikel. Folliklarnas densitet varierar beroende på området. Densiteten varierar alltså från 60 folliklar per kvadratcentimeter på benen till 500 folliklar per kvadratcentimeter på överläppen.
- Håret växer i cykler. Under växtfasen (eller anagen fas), får håret näring av hudpapillen. Håret går sedan in i en övergångsfas (eller katagen fas), och går till sist in i en vilande fas (eller telegen fas). Under den sista fasen växer inte håret eftersom det är separerat från hudpapillen. Håret faller ut, follikeln får ny kontakt med hudpapillen och en ny cykel inleds. Det tar ungefär tre veckor för ett hår att

växa från follikelns bas till hudytan och bli synligt. Det tar med andra ord tre veckor innan håret syns och märks från det att det börjar växa. Om vi tar bort hår en dag och det växer fram hår en vecka senare, tror vi i allmänhet att det handlar om samma hår som växer tillbaka medan det i själva verket kommer från en annan follikel.

- Från det ögonblick då håret framträder i hudens yta, fortsätter tillväxtperioden i ytterligare ca 13 veckor. För att behandlingen skall vara effektiv, måste håret behandlas under den anagena fasen, när hudpapillen fortfarande är aktiv. Detta är grundläggande i hårets tillväxtcykel.
- Håret växer tillbaka i oregelbundna cykler. På ett visst område befinner sig vissa hår i en växtfas (anagen) och andra i den vilande fasen (telegen). Det är därför behandlingen måste genomföras en eller två gånger i veckan. De första resultaten är märkbara efter några veckors behandling, och effekten ökar vid långvarig och regelbunden användning av produkten.

## BESKRIVNING AV APPARATEN

1. Precisionssond (fastsätts direkt i apparaten) + 4 huvuden
2. Huvudkontakt (lila)
  - + 2 runda kontaktelektroder (lila)
  - + 1 rund kontaktelektrod (bordeaux)
3. Runda kontaktelektroder för ansiktet
4. Runda kontaktelektroder för känsliga platser
5. Runda kontaktelektroder för benen
6. Runda kontaktelektroder
7. Förvaringsetui
8. Adaptater

## LADDNING AV APPARATEN

Stick in transformatorkontakten i apparaten. Kontrollera att apparatens spänning är densamma som spänningen i eluttaget. Anslut stickkontakten i ett eluttag. Ett kort dubbelt pip ljud tillkännager att apparaten är ansluten. Batterisymbolen på displayen blinkar när apparaten laddas och slutar blinka när den är fulladdad. Det tar ungefär 12 timmar innan apparaten är fulladdad. Ladda om apparaten efter varje användningstillfälle.

Observera: Om apparaten är påkopplad då den sluts till nätet stängs den automatiskt av för att laddas på nytt.

## ANVÄNDNING NÄR APPARATEN ÄR NÄTANSLUTEN


Apparaten kan också användas när den är nätansluten. Stick transformatorkontakten i apparaten och anslut den sedan till eluttaget. Kontrollera först att apparatens spänning överensstämmer med spänningen i eluttaget.

## TIPS FÖR ANVÄNDNING FÖRBEREDELSE AV HUDEN

- Tvätta huden noggrant med en alkoholfri rengöringsgel för att ta bort alla spår av lotion, olja, smink och eventuella föroreningar på huden. Behandlingen skall alltid utföras på ren hud (jmf. kontraindikationer). För att elektroderna skall fungera på bästa sätt, se till att de är rena för att garantera god kontakt med huden.
- Behandlingen kan utföras innan eller efter hårborttagning. Det är inte nödvändigt att se håren för att använda elektrolys (när växtfasen börjar är håret fortfarande 4 mm under huden).

## ANVÄNDNING AV ELEKTRODER OCH HANDENHETEN

1. Sätt på BaByliss ELECTROLISS genom att hålla knappen nedtryckt minst två sekunder.
2. Välj den elektrodform som är lämplig för det område du vill behandla, eller använd precisionsenheten.

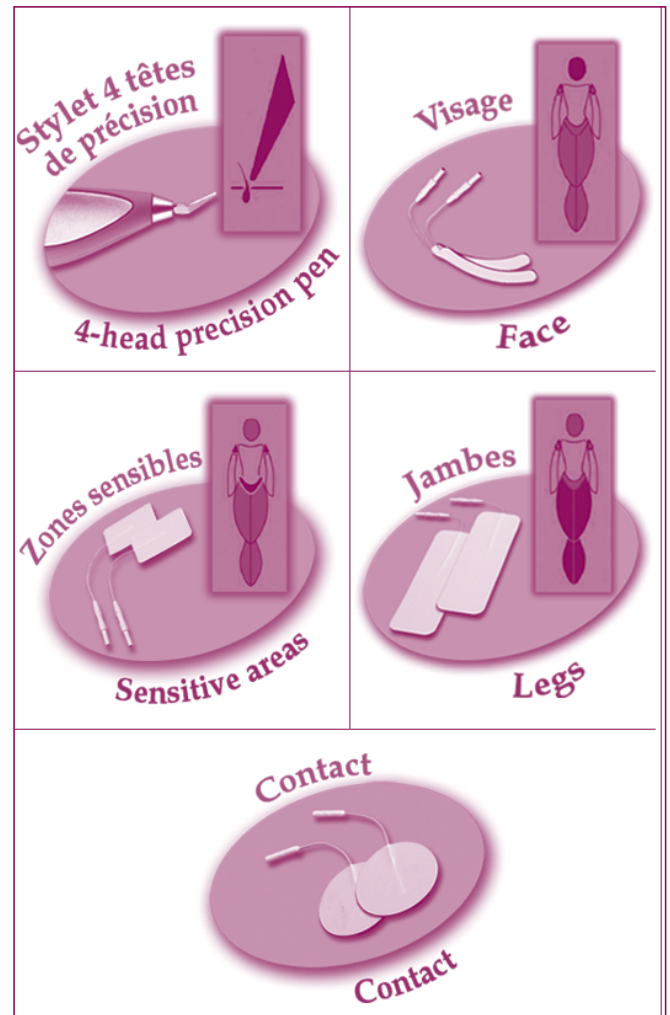

3. Anslut huvudkontakten (lilafärgad) i apparaten. Anslut de två elektroder du valt ut (till de två lilafärgade stiften) och kontaktelektroden (rund, rödbrun till färgen).

ELLER

- 3'. Anslut precisionsenheten i apparaten.
4. Avlägsna de **två vidhäftande behandlingselektroderna** du valt från skyddsfilmerna och placera dem på det

område som skall behandlas. Placera sedan den runda kontakt-elektroden mellan de två behandlings-elektroden nära det område som skall behandlas på lika stort avstånd från varje elektrod.

5. Kontrollera att variatorn för reglering av strömstyrkan (det lilla hjulet) är inställt på minimiläget.
6. Håll knappen nedtryckt en sekund, släpp knappen och ett pip ljud informerar att apparaten är färdig att användas. Timglasets börjar röra sig och den del av kroppen som behandlas börjar blinka. Om det ljuder två signaler anger det att elektroderna är felaktigt placerade.
7. Apparaten är utrustad med en mekanism för automatisk igenkänning, den kommer med andra ord att känna igen de elektroder som du har anslutit, och de områden som skall behandlas visas på modellens ikon på LCD:n. Följ dessa anvisningar eftersom programmen endast är avsedda för specifika områden på kroppen.
8. Ställ in variatorn för reglering av strömstyrkan tills du känner svaga stickningar. Justera strömstyrkan efter din känslighet, ELECTROLISS kommer att anpassa behandlingstiden automatiskt efter strömstyrkan. Timglasets ikon som visas på displayen talar om för dig hur lång tiden är.

**VIKTIGT:** Behandlingen skall inte vara smärtsam. I de flesta fall kommer du inte att känna någonting, eller möjligen svaga stickningar. Om det känns annorlunda, även vid en låg intensitet, flytta kontaktelektroden en aning från behandlings-

elektrodena.

*Tveka hur som helst inte om du känner att du behöver använda en låg intensitet under den första behandlingen. Om du klarar intensiteten, öka den långsamt under följande användningstillfällen.*


9. 3 korta pipsignaler hörs vid slutet av varje cykel samtidigt som kontaktelektroden blinkar på displayen. Kom ihåg att ta bort alla elektroder, inklusive kontaktelektroden för behandling av en annan del av området.
10. Placera behandlingselektroden och kontaktelektroden på ett nytt område och tryck på knappen för att starta en ny session med ELECTROLISS.

**OBS!** Om elektroderna avlägsnas under användning avbryts sessionen automatiskt.

**Precisionsenheten** kan utrustas med 4 olika huvuden; välj lämpligt huvud för det område som skall behandlas: det breda huvudet för överläppen, det smalare huvudet för enstaka hår.

Den konduktiva gelen som medföljer ökar precisionsenhetens ledningsförmåga; applicera rikligt på det huvud du valt.

Håll handenheten som du håller en pincett, med fingrarna på det ergonomiska handtaget. Håll apparaten i ena handen och tryck på knappen, med andra handen håller du handenheten och vidrör det område som skall behandlas

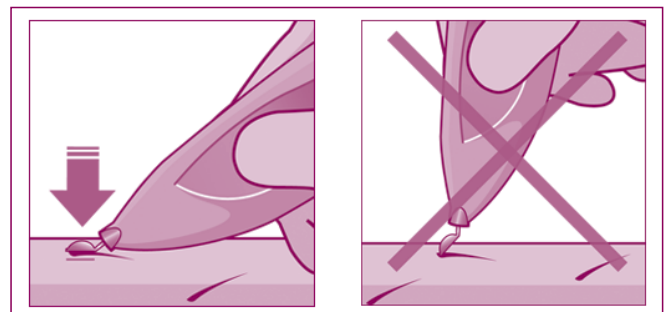

med apparatens huvud, samtidigt som du ser till att metallhuvudet vilar platt mot huden.

## FRÅGOR & SVAR

- *Vad gör jag om apparaten inte går att sätta på?*

Kontrollera att apparatens batteri är fulladdat innan den används.

- *Vad gör jag om displayen slockar?*

Kontrollera att apparatens batteri är fulladdat innan den används.

- *Vad gör jag om apparaten stängs av när den startar programmet?*

Undvik att hålla startknappen intryckt för länge.

- *Vad gör jag om apparaten inte startar den behandling som planerats?*

Kontrollera att elektroderna är rätt anslutna.

Kontrollera att elektroderna sitter fast ordentligt på huden.

Kontrollera att elektroderna är tillräckligt fuktiga.

- *Vad gör jag om elektroderna inte fastnar ordentligt vid huden längre?*

Fukta elektroderna med några droppar vatten mellan fingertopparna. Låt elektroden absorbera fukten så att gelen häftar vid igen. Sätt sedan tillbaka elektroden på skyddsfilmens räta sida eller använd den omedelbart på nytt.

## EFTER EN ELEKTROLYSBEHANDLING

Efter varje elektrolysbehandling, helst efter 12 timmar, kan håren tas bort med en traditionell hårborttagningsmetod: pincett, vax eller elektrisk hårborttagning. Håret är i regel lätt att dra ut och bjuder inte motstånd.

Efter hårborttagning kan du använda en återfuktningskräm avsedd att användas

efter hårborttagning för att lindra hudirritationen.

## BEHANDLINGENS LÄNGD

Behandlingen skall utföras en eller två gånger i veckan. De första resultaten är märkbara efter några veckors behandling och effekten ökar vid långvarig och regelbunden användning av produkten. Behandlingens längd varierar beroende på vilket område som behandlas och hårens beskaffenhet. Tjockare hår kan kräva längre behandlingstid. Vid behandling blir håren allt tunnare och allt lättare att dra ut, för att till sist försvinna.

## REKOMMENDATIONER OCH KONTRA-INDIKATIONER

- Elektroderna får endast placeras på områden som anges i denna bruksanvisning. De får inte placeras nära hjärtat, halspulsådern, könsorganen eller ögonen.
- Använd inte elektroderna eller handenheten på öppna sår, hudsprickor, brännskador, vårtor, födelsemärken, solbränd hud eller åderbräck. Använd inte apparaten om du lider av hudirritationer eller hudinfektioner som exempelvis psoriasis eller eksem.
- Använd inte parfym eller deodorant på det behandlade området inom 24 timmar.

Rådgör med läkare innan du använder apparaten utan läkares ordination om:

- du har ett elektroniskt implantat (pacemaker, etc.) eller metallimplantat, inklusive spiral
- du har svagt hjärta
- du är gravid
- du lider av cancer, epilepsi eller diabetes

Använd inte apparaten på områden med nedsatt känsel.

*VIKTIGT: En lätt rodnad på huden i området där elektroderna placeras och/eller handenheten användes är normalt och det går över snabbt. Avbryt behandlingen och rådgör med läkare om rodnaden inte går över.*

*Vid behandling av överläppen kan du få en svag metallsmak i munnen. Detta är normalt och det är resultatet av strömmen. Eftersmaken försvinner när strömmen bryts.*

## UNDERHÅLL AV APPARATEN

**Apparaten** kräver inget särskilt underhåll. Rengör den genom att torka den med en fuktig trasa. Låt aldrig vattnet tränga in, lämna inte apparaten i solen och utsätt den inte för extrema temperaturer.

### Elektroderna

**VIKTIGT:** För att ta bort elektroderna, dra försiktigt i kanterna. Dra aldrig i ledningarna. Elektroderna har en begränsad livslängd beroende på hur ofta de används (ungefär 50 i genomsnitt), användningsområde, underhåll, och så vidare. Om vidhäftningen är dålig måste de bytas ut. Använd endast BaByliss elektroder till denna apparat. Rådgör med närmaste BaByliss-återförsäljare.

Underhåll av elektroderna och åtgärder för att förlänga livslängden:

- Sätt alltid tillbaka elektroderna på skyddsfilmens rätta sida efter användning och förvara dem på en sval, torr plats.
- Om gelen börjar bli torr, fukta allting med ett sprej. Det räcker med en eller två vattendroppar. Låt elektroden

absorbiera fukten så att gelen blir klibbig igen, och sätt sedan tillbaka skyddsfilmerna på elektroden. Låt elektroden torka en aning i sval luft om gelen är för fuktig (exempelvis i kylskåp) med den vidhäftande ytan vänd uppåt, tills gelen blir klibbig igen.

**Handenheten** kräver inget särskilt underhåll. Använd en ren trasa med lite mildt rengöringsmedel för att rengöra den. Desinfektera metalltoppen regelbundet med alkohol.

## SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Använd ELECTROLISS endast för hårborttagning med elektrolys enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.
- Använd endast BaByliss konduktiv gel och BaByliss elektroder.
- Sänk inte apparaten i vatten eller någon annan vätska. Använd den inte nära ett badkar, handfat eller annan behållare med vatten i.
- Var särskilt försiktig om apparaten används i närheten av barn eller personer med fysiska handikapp. Apparaten skall förvaras utom räckhåll för barn. Använd inte apparaten på barn.
- Om det uppstår ett problem, följ anvisningarna på det garantikort som medföljer apparaten.
- Denna apparat uppfyller de grundläggande kraven i direktiven 89/336/EEG (elektromagnetisk kompatibilitet) och 73/23/EEG (säkerhet för elektriska hushållsapparater), efter ändring genom direktiv 93/68/EEG (CE-märkning).
- Använd inte denna apparat samtidigt med andra apparater som sänder elektriska strömmar in i kroppen.